
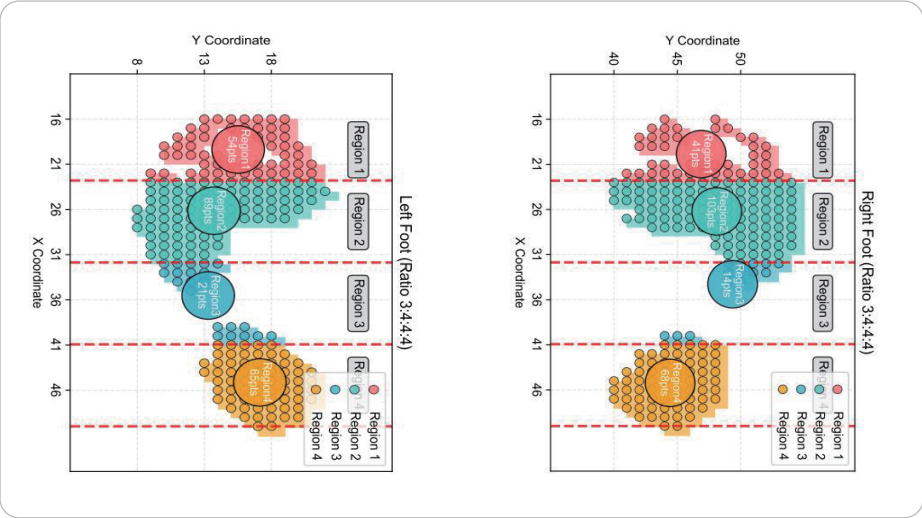


姓名 (name): 张博文

年龄 (age): 19岁

性别 (gender): 男

BMI (kg/m²): 23.8

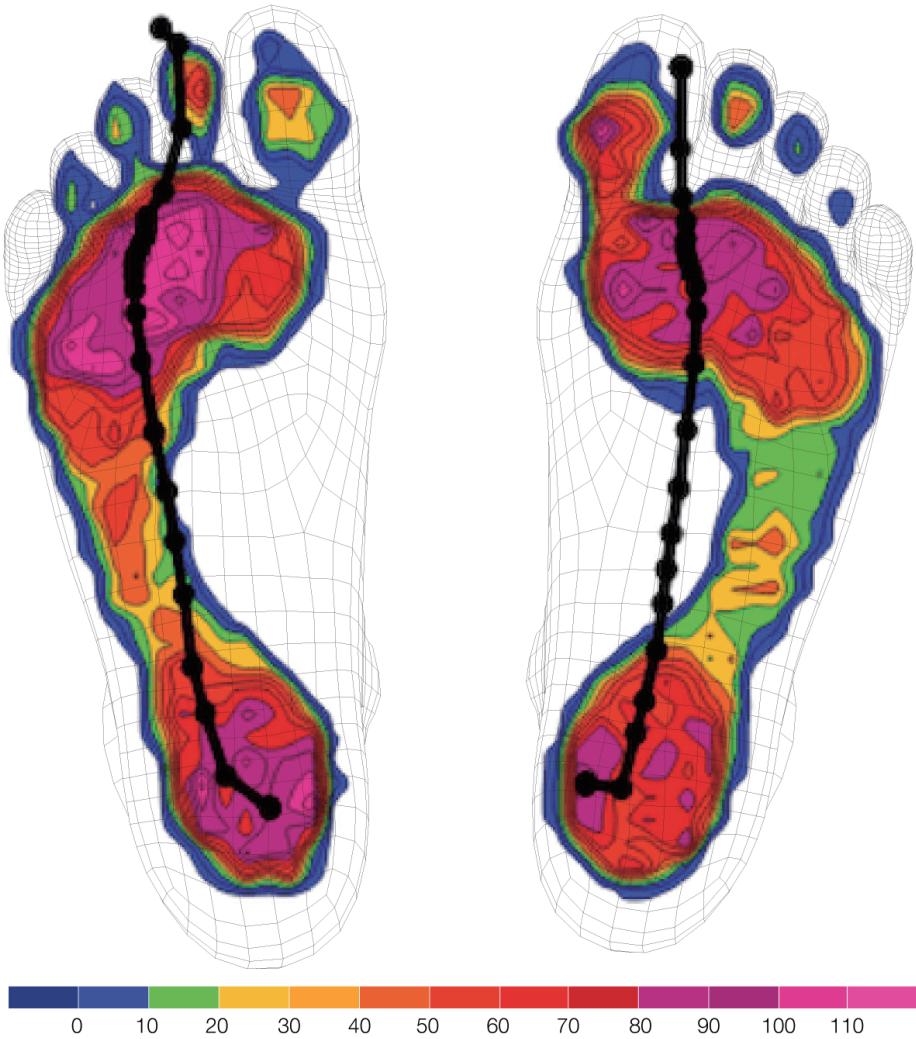

足弓指数(AI)



Left

0.1195

高足弓(high arch)

Right

0.0836

高足弓(high arch)

足长(cm)



Left

26.00

Right

26.70

足宽(cm)



Left

12.00

Right

12.00

全足面积(cm²)



Left

117.11

Right

119.56

前足面积(cm²)



Left

77.91

Right

76.93

中足面积(cm²)



Left

7.35

Right

11.27

后足面积(cm²)



Left

31.85

Right

31.36

前足压力(%)



Left

67.6

Right

65.3

中足压力(%)



Left

3.9

Right

6.2

后足压力(%)



Left

28.5

Right

28.5

COP距整体中心(cm)



Left

11.09

Right

11.69

左右脚前后差 (cm)



Left



0.50

Right

0



COP轨迹

COP trajectory

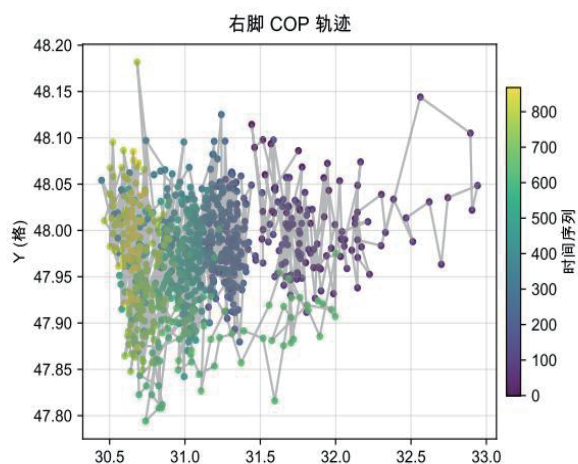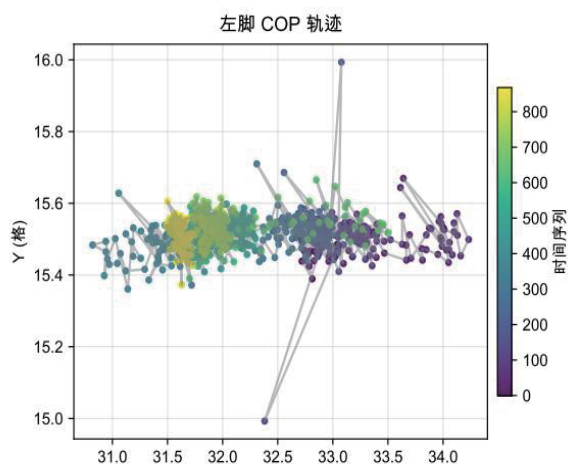


COP置信椭圆

COP confidence ellipse

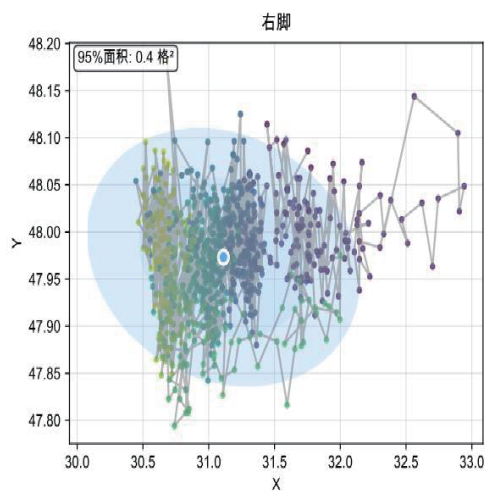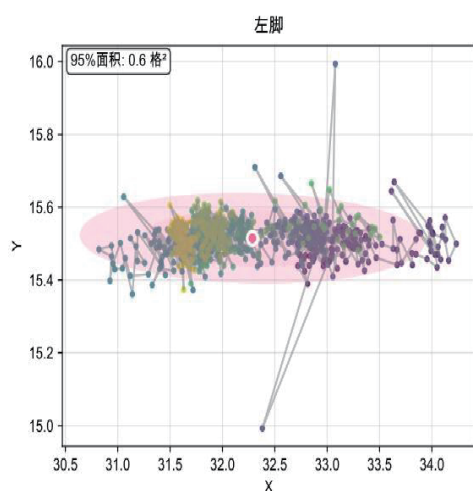

COP速度时间序列

COP velocity time series

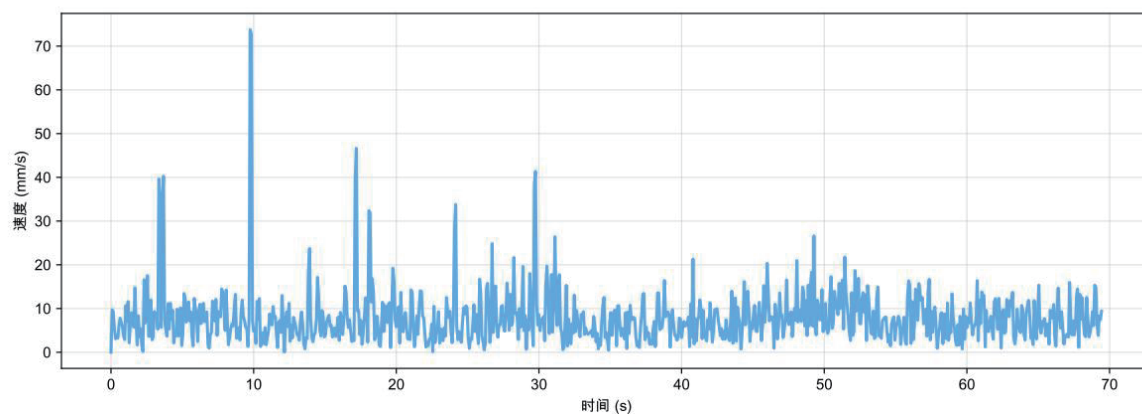

参数	数值（单位）
轨迹长度	550.66 mm
接触面积	92.32 cm ²
长/短袖比	13.70
偏心率	1.00
Delta X	23.88 mm
Delta Y	7.01 mm
长轴	0.94 mm
短轴	0.07 mm
最大离心	1.36 mm
最小离心	0.00 mm
平均速度	7.92 mm/s
RMS 位移	0.47 mm
X 标准差	4.67 mm
Y 标准差	0.34 mm

注释：
Annotation

【足弓指数(AI)】	中足面积/(前足+中足+后足面积)。数值越大表示中足接触面积越大，足弓越低。 正常值: 0.21–0.26, >0.26 提示扁平足。
【足长】	足印最前端到最后端的直线距离。用于评估左右对称性、选择鞋码、定制鞋垫。
【足宽】	足印最宽处的横向距离。配合足长评估足型(宽型/窄型),指导鞋楦选择。
【总面积】	整个足底接触面积。面积越大提示足弓越低或体重越大。左右差异> 15%需关注
【前/中/后足面积】	各区域接触面积。前足大: 前掌负荷重；中足大: 足弓低；后足大: 后跟承重多。
【前/中/后足压力】	各区域压力占总压力百分比。正常:前足40–50%，中足5–10%，后足40–50%。
【COP距整体中心】	单脚压力中心到双脚总压力中心的距离。距离越小，该脚承重越接近身体重心。
【左右脚前后差】	左脚COP相对右脚的前后位置差。正值: 左脚靠前；负值: 右脚靠前；绝对值 >2cm提示站姿不对称。
【轨迹长度】	COP移动的总路径长度。数值越大说明身体摆动越频繁，平衡控制越差。正常 站立: 30秒内小于1000mm。
【接触面积】	COP活动范围的面积。数值越大说明摆动幅度越大，姿势稳定性越差。老年人 通常比年轻人大 20–30%。
【长/短轴比】	COP椭圆的长轴与短轴之比。比值越大说明摆动方向性越明显。
【偏心率】	椭圆偏离圆形的程度(0–1)。越接近1说明摆动越呈线性。越接近0说明各方向摆 动均匀。
【Delta X】	前后方向最大摆动幅度。数值越大说明前后稳定性越差。
【Delta Y】	前后方向最大摆动幅度。数值越大说明前后稳定性越差。
【长轴】	COP椭圆的最大直径。代表主要摆动方向的幅度。配合长/短轴比判断摆动模式
【短轴】	COP椭圆的最小直径。代表次要摆动方向的幅度。数值越小说明该方向控制越好。
【最大离心】	COP到平均中心的最大距离。反映极端摆动情况。突然增大可能提示失去平衡
【最小离心】	COP到平均中心的最小距离。数值越小说明能够回到中心位置的能力越好。
【平均速度】	COP移动的平均速度。速度越快说明姿势调节越频繁。
【RMS位移】	均方根位移,综合反映摆动强度。比平均值更敏感，临床常用。
【X标准差】	左右方向位置离散度。数值越大说明左右摆动越不规律。
【Y标准差】	前后方向位置离散度。数值越大说明前后摆动越不规律。